

# Определение теплоёмкости твёрдых тел (2.1.4)

Манро Эйден

## Введение

**Цель работы:** 1) измерение количества подведенного тепла и вызванного им нагрева твердого тела; 2) определение теплоемкости по экстраполяции отношения  $\Delta Q/\Delta T$  к нулевым потерям тепла.

**Оборудование:** калориметр с нагревателем и термометром сопротивления; амперметр; вольтметр; мост постоянного тока; источник питания 36 В.

## Теоретические сведения

В данной работе происходит измерение теплоемкости твердого тела с использованием следующей принципиальной связи:

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

Определение количества теплоты, переданного телу вызывает некоторые затруднения, так как часть теплоты будет передана окружающей среде через стенки калориметра. В итоге, количество теплоты, переданное телу с учетом теплопотерь через стенки можно определить как:

$$\Delta Q = P\Delta t - \lambda(T - T_{\kappa})\Delta t,$$

где  $P$  – мощность нагревателя,  $\lambda$  – коэффициент теплоотдачи стенок калориметра,  $T$  – температура тела,  $T_{\kappa}$  – температура окружающего калориметр воздуха,  $\Delta t$  – время, в течении которого происходит нагрев.

Из уравнений (??) и (??) получаем:

$$C = \frac{P - \lambda(T - T_{\kappa})}{\Delta T/\Delta t}$$

Формула (??) является основной расчетной формулой данной работы.

В формуле (??) в знаменателе стоит величина, для определения которой воспользуемся следующей методикой:

Построим график зависимости  $\frac{\Delta T}{\Delta t} = f(T)$  для широкого диапазона температур, после чего экстраполируем его для значения  $T = T_{\kappa}$ . В таком случае формула (??) приобретает вид:

$$C = \frac{P}{(\Delta T / \Delta t)_{T_K}}$$

Измерение температуры строится на принципе линейной зависимости сопротивления материала от изменения температуры по закону:

$$R_T = R_0 (1 + \alpha \Delta T),$$

Где  $R_0$  – сопротивление термометра при температуре  $0^\circ\text{C}$ ,  $R_T$  – сопротивление термометра при данной температуре. Учитывая данную зависимость, получаем итоговый вид для основной формулы:

$$C = \frac{PR\alpha}{\left(\frac{dR}{dt}\right)_{T_K} (1 + \alpha \Delta T_K)}$$

Коэффициент  $\alpha$ , входящий в данную формулу для меди равен  $\alpha = 4,28 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ , все остальные величины определяются экспериментально.

## Экспериментальная установка

Установка состоит из калориметра с пенопластовой изоляцией, помещенного в ящик из многослойной клееной фанеры. Внутренние стенки калориметра выполнены из материала с высокой теплопроводностью. Надежность теплового контакта между телом и стенками обеспечивается их формой: они имеют форму усеченных конусов и плотно прилегают друг к другу. Для выталкивания образца служит винт в доньшке внутренней стенки калориметра.

В стенку калориметра вмонтированы электронагреватель и термометр сопротивления. Схема включения нагревателя изображена на рисунке (??). Система реостатов позволяет установить нужную силу тока в цепи нагревателя. По амперметру и вольтметру определяется мощность, выделяемая током в нагревателе. Величина сопротивления термометра нагревателя измеряется мостом постоянного тока.

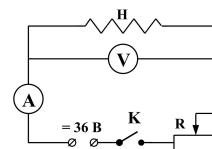


Рис. 1: Схема включения нагревателя

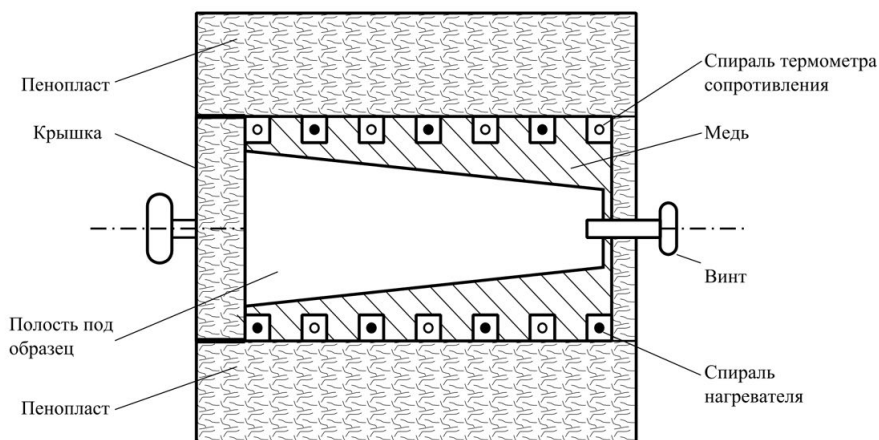


Рис. 2: Устройство калориметра

На рисунке (??) изображено устройство калориметра.

материал образца:	титан
масса образца, г	$293,2 \pm 0,5$

Таблица 1: Параметры исследуемых образцов

Запишем также иные параметры экспериментальной установки:

$$R_0 = 17,84 \pm 0,01 \text{ Ом}, \quad t_0 = 24,4^\circ \pm 1^\circ \text{C}$$

$$U = 36 \text{ В}, \quad I = 0,3 \text{ А}, \quad P = 10,8 \text{ Вт}$$